

Uitdagingen bij

wisselliging Cato's oplossingen

Turn All Geschikt voor gebruik bij

ATO FORM hecht veel waarde aan goede en persoonlijke begeleiding zodat er voor elke situatie een geschikte zorgoplossing wordt geboden.

Daarom bieden we voor een groot deel van onze mooie producten gratis proefplaatsingen, kosteloze trainingen en uniek onderhoud aan.

Op deze manier zetten we ons in om het dagelijkse leven van zorgverleners en zorgvragers plezieriger en comfortabeler te maken.



Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl





Hoe kun je eenvoudig, snel en veilig decubitus behandelen en zelfs voorkomen?
Cato weet raad!



Bij decubitus zijn matrassen niet afdoende en wisselligingen zijn zwaar voor zorgvrager en zorgverlener. Lees over de simpele oplossing!



- Ruggermergletsel veroorzaakt dwarslaesie en quadriplegie (met of zonder ventilator)
- Spierdystrofie
- Multiple sclerose
- Ernstig hoofdletsel en beroerte
- Ernstige aandoeningen van de luchtwegen, zoals chronische obstructieve longziekte
- Immobiliteit door ouderdom
- Kanker
- Guillain-Barré syndroom
- AIDS
- Coma
- Amputaties
- Osteomyelitis
- Degeneratieve schijfziekte
- Post spinale fusie en laminectomie
- Reumatoïde artritis
- ALS

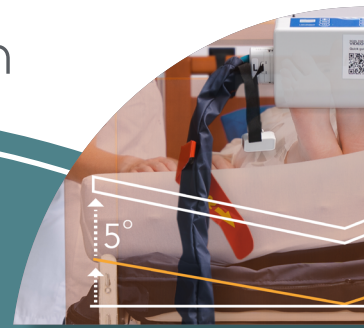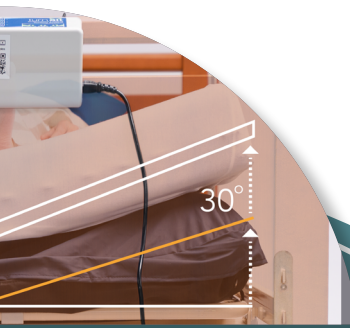



Uitdaging 1 Wakker worden

Handmatige herpositionering of wisselgigingen met een wisseldruksysteem maken de zorgvrager wakker

Hoe kun je dit voorkomen?

Cato's oplossing:

- Turn All zorgt voor automatische en zachte herpositionering waardoor de zorgvrager **niet wakker gemaakt wordt**.
- door de **betere slaapkwaliteit** heeft de zorgvrager overdag meer energie over
- de motor van Turn All maakt alleen geluid op de momenten dat het systeem van kant wisselt
- Turn All past **op elk verpleegbed** met een afneembaar matras, zodat de zorgvrager niet hoeft te wennen aan een nieuw matras

Uit de praktijk:

"Tijdens de rustmomenten overdag of in de nacht hoeft de zorgvrager niet wakker gemaakt te worden voor de wisselgigging omdat dit nu automatisch gaat. Ze wilde graag in slaap vallen op de rechterzijde én alleen via die zijde wisselen. Dankzij de nieuwe adapter van de Turn All konden we dit precies zo instellen."

Uitdaging 2 Angst en pijn

De zorgvrager ervaart tijdens een zijdelingse lift een onveilig gevoel vanwege angst om weg te glijden.

Hoe kun je dit voorkomen?

Cato's oplossing

- Turn All plaatst de zorgvrager afwisselend aan de rechter- en linkerkant in een **zijligging van 30°**
- de tegenoverliggende zijde wordt tegelijkertijd met 5° verhoogd waardoor het **risico op schuifkrachten geminimaliseerd** wordt
- dit speciale ondersteuningssysteem **vermindert het gevoel van wegglijden** waardoor de zorgvrager zich veiliger voelt

Uit de praktijk:

"De pijn bij de zorgvrager neemt af doordat we niet met glijzeilen en/of tilliften hoeven te werken. Dit verhoogt het comfort bij de zorgvrager, maar ook bij de betrokken familie omdat de zorgvrager automatisch comfortabel en zacht herpositioneerd wordt."



Uitdaging 3 Ingewikkelde zorg

Goede handmatige herpositionering en/of wisselgigsystemen vereisen vaak veel (technische) kennis, uitleg en handelingen

Hoe kun je dit voorkomen?

Cato's oplossing

- Turn All is **zeer eenvoudig** te plaatsen, technische kennis is niet vereist
- door de eenvoudige installatie kan het systeem **snel in gebruik** worden genomen
- doordat Turn All onder het matras wordt geplaatst, is er **minder reiniging** nodig en is het systeem **minder** gevoelig voor **beschadigingen**

Uit de praktijk:

"Er zijn geen medewerkers nodig tijdens het toepassen van de wisselgigging waardoor deze extra zorgtijd op een andere manier inzetbaar wordt. Concluderend geeft het verplegend personeel aan dat de Turn All een grote meerwaarde heeft in o.a. de thuiszorg, omdat het eenvoudig te gebruiken is en al op korte termijn een groot effect kan laten zien."

Uit een Hospice

Voordelen van Cato's oplossing Turn All:

- Laterale lift van het matras tot 30°
- Ondersteuningssysteem van 5°
- Tot wel 225 kg belastbaar (obese versie tot 400 kg)
- Drie verschillende draaicyclussen van 30/30, 60/60 en 90/90 minuten
- Kan op elk verpleegbed met een afneembaar matras geplaatst worden
- Uitermate geschikt voor het voorkomen en behandelen van decubitus
- Zeer stil tijdens gebruik
- Bevordert de slaapkwaliteit van de zorgvrager
- Eenvoudig en snel in te stellen
- Eenvoudig te reinigen

Zelf je wisselgigging instellen:

Adapters bij Turn All:

- knuffelhouding
- links of rechts
- 15° of 30°

